

SÜREKLİ GLİKOZ TAKİP SİSTEMİ

7 Başlangıç için Basit Adımlar Hızlı Başlatma Kılavuzu

Yeni Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glukoz Takip Sistem kitinizi (CGM) güle güle kullanın! G4 PLATINUM CGM Sistemini kullanırken, 5 dakikadan 7 güne kadar zaman aralıkları ile, sürekli ve gerçek zamanlı glukoz değerlerinizi görebileceksiniz. Bu değerler glukoz seviyenizde değişim ve modelleri bulmanıza, glukoz seviyenizin hangi seviyede olduğunu anlamana, hangi yöne doğru hareket ettiğini incelemenize ve ne kadar hızla düşüp yükseldiğini görmenize yardımcı olur.

Başlamadan önce, başlangıç setinden çıkan Dexcom G4 PLATINUM Sistemi Kullanıcı Kılavuzunu ve Dexcom G4 PLATINUM CGM Eğitim Programı CD'sini inceleyin.

Bu Kılavuz, Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemi ile uygulanmak üzere yedi basit adımı içerir. Sisteminize ilgili bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa, yerel dağıtıcınıza başvurun.

UYARI: Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glukoz İzleme Sistemini kullanmadan önce Dexcom G4 PLATINUM Sistemi Kullanıcı Kılavuzu'ndaki tüm endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve detaylı prosedürleri inceleyin.


Dexcom

Adım 1

Cihazımızı tanıyalım

Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glukoz Takip Sisteminiz 3 bileşenden oluşmaktadır: Alıcı, Verici ve Sensör.

Dexcom G4 PLATINUM Alıcısı

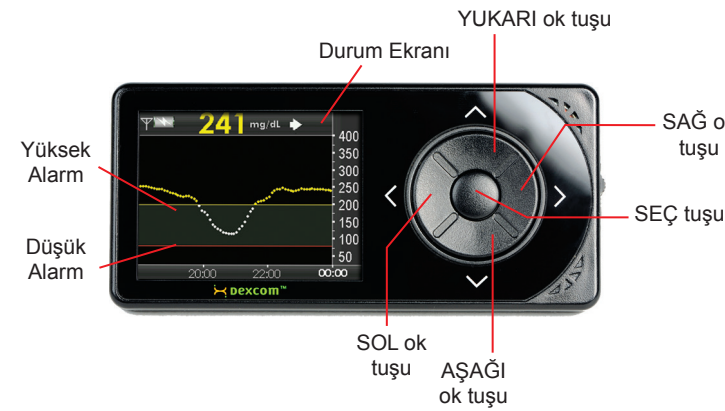

Alıcı küçük, elle taşınabilir boyutta, cep telefonuna benzeyen bir cihazdır. Sensör glukoz değerlerini, değişim grafiklerini ve değişim okunun yönleri ile oranlarını gösterir.

Değişim ekranlarında ilerlemek, menü satırlarını işaretlemek ya da değerleri seçmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

Alıcıyı açmak ya da işaretlenen satırı seçmek için **SEÇ** tuşuna basın.

Ekrandaki son nesneye ya da bir önceki ekrana dönmek için **SOL** ok tuşuna basın.

Bir sonraki nesneyi işaretlemek için **SAĞ** ok tuşuna basın.

• Değişim ekranındaki kırmızı çizgi düşük alarm seviyesini gösterir.

• Değişim ekranındaki sarı çizgi yüksek alarm seviyesini gösterir.

Cihazımızı tanıyalım (devamı)

Dexcom G4 PLATINUM Vericisi (SAKIN ATMAYIN!)



Verici sensör bölmenize takılan gri renkli "çiptir".


2 saatlik başlatma aşamasında ve diğer işlemlerde vericiyi alıcıdan 6 metre mesafede tutun.

Verici bataryaları en az 6 ay ömürlüdür. **Verici Batarya Seviyesi Düşük** uyarısı ekranı ilk olarak yaklaşık 1 haftalık batarya ömrü kaldığında görülür. Bu uyarıyı gördüğünüzde vericini mümkün olan en kısa sürede değiştirin.




Verici Batarya Seviyesi Düşük ekranı

Dexcom G4 PLATINUM Sensör Aplikatörü (Tek kullanımlık)

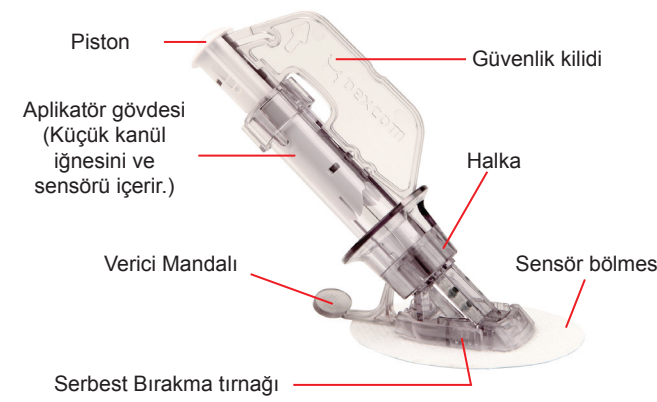

Sensör, vücudunuza takılan ve (7 güne kadar) tüm oturma boyunca orada kalan parçadır. Eğer sensör oturumunuzla ilgili bir sorun yaşarsanız, yerel dağıtıcınıza görüşene kadar sensörü saklayın.

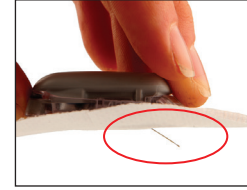

Sensör

Adım 2

Cihazın Kurulması

Vericini etkinleştirilmesi:

Vericiyi yerinden çıkartın ve "açılması" için 10 dakika bekleyin.



Verici Kutusu



Alıcı USB port kapağı



USB kablosu alıcıya takıldı

Alıcının şarj edilmesi:

Başlamadan önce, Dexcom G4 PLATINUM alıcısını tamamen şarj edin. Tam şarj etme işlemi 5 saat kadar sürer ve 3 gün yetecek şarj sağlar. Alıcınızı şarj etmek için USB portu kapağını açın. **Alıcının şarj edilmediği durumlarda, USB port kapağını kapalı tutun.**

Alıcıyı şarj etmenin iki yolu vardır:

a. USB kabloyu elektrik prize adaptörüne takın. Daha sonra bu adaptörü bir elektrik kaynağına takın (örn. duvardaki priz) ve kablunun diğer ucunu alıcınıza bağlayın.

YA DA

b. USB kablounuzu bilgisayarınıza bağlayıp, kablunun diğer ucunu alıcınıza takın. Ancak, ilk olarak Dexcom Studio yazılımını yüklemeniz gerekir.

Önce batarya şarj ekranı görülür.

Birkaç saniye sonra batarya şarj sembolü () 3 saatlik değişim grafik ekranının sol üst köşesinde belirir (ana ekran). Alıcı tamamen şarj edildiğinde, batarya şarj sembolü gri renge döner.

NOT: Bir sensör oturumu sırasında, alıcı şarj olurken sensör glukoz değerlerini almaya devam edebilirsiniz. Alıcının şarj edilmesi gerektiği durumlarda, düşük batarya alarmı sizi uyarır.

Cihazınızın Kurulumu (devamı)

Kurulum Sihirbazı:


Alıcıyı açmak için **SEÇ** tuşuna basın. Kurulum Sihirbazı size Dil ayarlarının yapılmasında, Zaman Formatı ve Zaman/Tarih seçiminde, Verici Kimliği tanıtılmasında ve Düşük/Yüksek Alarmların oluşturulmasında yardımcı olur. **NOT:** Glukoz ölçüm birimleri (mg/dL) cihazınızda sabittir ve değiştirilemez.

Kurulum Sihirbazı, sadece Dexcom G4 PLATINUM Alıcısını ilk defa çalıştırılırken başlatılır.

Dil Ayarları:

a. İsteddiğiniz dili bulmak için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

b. İşaretlenen dili seçmek için **SEÇ** tuşuna basın.

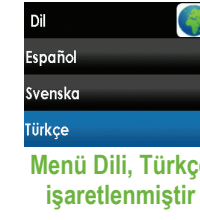


Zaman Formatı Ayarları:

Zaman Formatı Ayarları:

Saat biçimleri 24 Saat veya AM/PM (12-saat) olarak ayarlanabilir.

a. İsteddiğiniz saat biçimini seçmek için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

b. İşaretlenen saat formatını seçmek için **SEÇ** tuşuna basın.

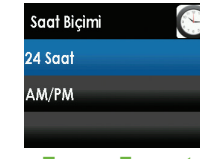

Zaman Formatı menüsü, 24 saat işaretlenmiştir.

Saat/Tarih Ayarları:

a. İsteddiğiniz sayı ya da değeri bulmak için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

b. Bir sonraki bölüme geçmek için **SAĞ** ya da **SEÇ** tuşlarına basın.

c. Zamanı ayarladıktan sonra, değişiklikleri kabul etmek için **SEÇ** tuşuna basın.



Zaman/Tarih ekranının kurulumu

Cihazınızın Kurulumu (devamı)

Verici Kimliğinizin Ayarlanması:

Verici kimliğiniz, vericiniz ile alıcınızın iletişim kurmasını sağlar.

a. Verici kimliğini, vericinizin arkasında bulabilirsiniz.



Vericinin arka yüzünde bulunan bilgiler yukarıdaki resimde gösterilene benzer olabilir.

b. Her bir boşluktaki harf ve sayıları girmek için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

c. Bir sonraki bölüme geçmek için **SAĞ** ya da **SEÇ** tuşlarına basın.

d. Zamanı ayarladıktan sonra, değişiklikleri kabul etmek için **SEÇ** tuşuna basın.

NOT: Verici kimliğini sadece etkin bir sensör oturumunun olmadığı bir zamanda girebilirsiniz.

Düşük/Yüksek Glukoz Alarm Seviyelerinin Ayarlanması:


Varsayılan ayarlarda düşük ve yüksek alarm seviyeleri 80 mg/dL ve 200 mg/dL'dir ancak bu seviyeler değiştirilebilir ya da kapatılabilir.

a. Düşük alarm seviyesini 60 ila 100 mg/dL arasında bir değer ile değiştirmek için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

b. Yeni seviyeyi kabul etmek için **SEÇ** tuşuna basın.

c. Yüksek alarm seviyenizi 120 ila 400 mg/dL arasında bir değerle değiştirmek için a ve b aşamalarını tekrar edin.

NOT: Ayrıca 55 mg/dL düzeyinde sabit bir alarm seviyesi vardır.

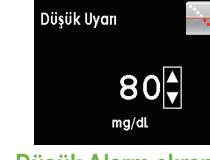

Düşük Alarm ekranının kurulumu



Yüksek Alarm ekranının kurulumu

Kurulum Sihirbazının aşamalarını bitirdikten sonra alıcınız 3 saatlik değişim grafiğini (ana ekran) gösterir.

Adım 3

Alarm Profilinin Ayarlanması

Alıcıdaki "Alarm Profillerini" kendi ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde seçebilirsiniz.

Alarm Profili seçenekleriniz şunlardır:



"Titreşim" alıcınızın sesiz olmasını ve sadece titreşim ile uyarılmak istediğinizde kullanılabilir. Bu alarm seçeneğinde sadece glukozun 55 mg/dL seviyesinin altına düşmesi durumunda sabit olarak sesli alarm çalar. Bu alarm sizi ilk olarak titreşimle uyarır; ardından alarm onaylanmazsa 5 dakika sonra bip sesi duyulur.



"Hafif" bu alarm türü düşük seviyede uyarılmak istendiğinde kullanılabilir. Bu seçenek alarm seslerini düşük seviyede tutar.



"Normal" varsayılan ayardır. Bu seçenek alarm seslerini yüksek seviyede tutar.



"Yoğun" bu alarm türü en üst seviyede uyarılmak istendiğinde kullanılabilir. Bu alarm türü tüm uyarı ve alarmları hemen fark edilmiş seviyede tutar.



"HipoTekrar" seçeneği aşırı ve çok düşük glukoz seviyelerinde kullanıcıyı uyarmak için kullanılır. Bu seçenek normal profil gibidir, ancak çalan alarm kullanıcı tarafından onaylanana ya da glukoz seviyesi 55 mg/dL seviyesinin üzerine çıkana kadar her 5 saniyede bir tekrarlanır.

Ana Menüde yer alan Profiller seçeneğindeki "Deneme" satırını seçerek her bir profilin örneğini duyabilirsiniz.

Alarm profilinizi kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:


a. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için **SEÇ** tuşuna basın.

b. Profilleri işaretlemek için **AŞAĞI** ok tuşuna basın. **SEÇ** tuşuna basın.

c. Kullanmak istediğiniz alarm profilini işaretlemek için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın.

d. **SEÇ** tuşuna basın. Seçtiğiniz profilin sağ tarafında bir **✓** çıkar.


NOT: Hangi profili seçerseniz seçin, tüm uyarı ve alarmlar sizi ilk olarak titreşimle uyarır. İlk titreşimden sonra alarmı onaylarsanız, bir sesi duyulmaz.

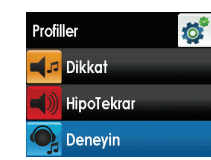

Profiller menüsü, Deneyin işaretlenmiştir.

Sensörünüzün Takılması (devamı)

f. Sensörü vücudunuza yatay yerleştirin, dikey DEĞİL. Bandi cildinize sabitlemek için parmaklarınızı yapışkan bandın üzerinde gezdirin.

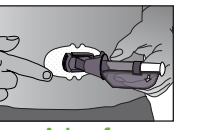


Adım f

g. Aplikatörü tutun ve güvenlik kilidini resimde görülen okların istikametine doğru, aplikatörden uzağa çekin. Güvenlik Kilidini sensör oturumu sonunda Vericiyi çıkarırken yardımcı olması için saklayın.



Adım g

h. Bir elinizin parmaklarını beyaz yapışkan bandın kenarına yerleştirin (sensörün verici mandalından uzak olan diğer tarafı). Bu elinizi kullanarak derinizi çekin.

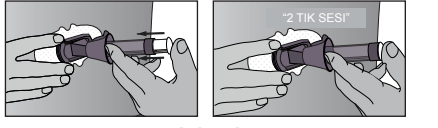

Adım h

i. Derinizi çekili tutarken, diğer elinizin iki parmağını halkanın üzerine yerleştirin (bkz. resim). Başparmağınızı beyaz pistonun üzerine yerleştirin ve tamamen aşağı itin. **2 tık sesi** duymazsınız gerekir.



Adım i

j. 2 parmağınızı halkanın üzerinden halkanın altına kaydırın. Başparmağınızı halkanın üzerinde tutun ve **2 tık sesi** duyana ya da daha fazla çekilecek pay kalmayana kadar halkayı başparmağınıza doğru çekin.



Adım j

k. Verici mandalının aşağı konumda olduğundan emin olun (vücudunuza karşı). Sensör bölmesinin iki yanından yer alan tırtıklı kısımları merkezlerinden sıkın. Sensör Aplikatörünü vücudunuzdan çekerek çıkartın.



Adım k

Vericinizin Takılması

a. Vericinin arka kısmını alkolü mendille silin. Kurumasını bekleyin.

b. Vericiyi sensör bölgesine yerleştirin (düz kısmı alta, dar kısmı verici mandalından uzağa gelecek şekilde).



Vericiyi Sensör Bölmesine takın.

Vericinizin Takılması (devamı)

c. Vericinizin yerini sabitlemek için üzerine parmağınızla bastırın. Diğer elinizle, **2 tık sesi** duyana kadar Verici mandalını ileri doğru kaydırın.



Sensör bölgesindeki vericinin yandan görünümü

d. Sensör bölgesinin yanlarını bir elinizle tutun. Verici mandalını bir elinizle vücudunuzdan uzağa çekerek çıkartın.



Verici Mandalını Yıkama ya da Aşağı Oynatma

Adım 5

Sensör Oturumunuzun Başlatılması


Sensörünüzü ve vericinizi taktıysanız, alıcınızdaki sensör oturumunu başlatmanız gerekir.

a. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için **SEÇ** tuşuna basın.

b. Sensörü Başlat seçeneğini vurgulamak için **ALT** ok tuşuna basın. **SEÇ** tuşuna basın. 2 saatlik başlatma sürecinin başladığını göstermek için, Sensör İşlem Başlatma ekranı çıkar.


c. Alıcınız ile vericinizin iletişim halinde olduğundan emin olmak için sensör oturumunu başlattıktan 10 dakika sonra alıcınızı kontrol edin. Değişim Grafik Ekranının sol üst köşesinde bir anten sembolü () olması gerekir. Bunun yerine, değişim grafiğinin sağ üst köşesinde Kapsam Dışı sembolü () görürseniz, ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Sistem Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

d. Alıcı değişim ekranında 2 saatlik geri sayım sembolü çıkar ve 2 saatlik başlatma süreci boyunca devam eder.

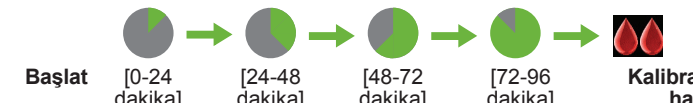

Sensör başlangıcında geri sayım sembolü dolmaya başlar. Bu sembollerden herhangi birisini gördüğünüzde, HİÇBİR glukoz değeri ya da alarmı alamazsınız.

NOT: 2 saatlik başlatma süreci bitene ve başlangıç kalibrasyonunu tamamlayana kadar HİÇBİR glukoz değeri ve uyarısı alamazsınız.

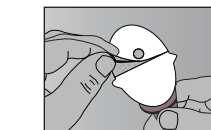

Adım e

Adım 6

Kalibre Etme

Dexcom G4 PLATINUM Sistemini kalibre etmek için kan şekeri ölçüm cihazınızı kullanmalısınız. 2 saatlik başlatma sürecinden sonra, sensör glikoz değerleri almaya başlamadan önce iki kalibrasyon değeri girmelisiniz. Kalibrasyon kan şekeri değerleri alıcısına kan şekeri değerleri ölçümünden sonra 5 dakika içinde girilmelidir.

Başlangıç Kalibrasyonu:

- 2 saatlik başlatma sürecinden sonra, alıcı ekranında başlangıç kalibrasyonu ikili kan damlası sembolü çıkar. Bu uyarıyı silmek için **SEÇ** tuşuna basın.
- Daha sonra ellerinizi yıkayıp kurutun.
- Kan Seker ölçüm cihazınız ile parmak ucu kan şekeri numunesi alın.



Başlangıç Kalibrasyon Uyarısı

- Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için **SEÇ** tuşuna basın.
- Kan şekeri Değeri Gir seçeneğini vurgulamak için **AŞAĞI** ok tuşuna basın. **SEÇ** tuşuna basın.
- Başlangıç kalibrasyonu için alıcıda varsayılan kan şekeri değeri 120 mg/dL'dir. Glikoz ölçüm cihazınızdan elde ettiğiniz kan şekeri değerini Alıcısına girebilmek için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** ok tuşlarına basın. **SEÇ** tuşuna basın.
- Kalibrasyonu kabul etmek için **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
- İkinci kan şekeri değerini girmek için c ile g arası adımları tekrar edin.

Kalibrasyon Güncellemesi:

Kalibrasyon güncellemesi gerektiğinde, tekli kalibrasyon kan damlası uyarısı ekranda belirir. Bu uyarıyı onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.



Kalibrasyon uyarısı

Başlangıç kalibrasyonundan sonra, en az her 12 saatte bir kalibrasyon güncellemesi yapılmalıdır. **NOT:** Tavsiye edilenden daha az kalibrasyon yapmak, yanlış sensör glikoz değeri alınmasıyla sonuçlanır. Eğer isterseniz, gün içinde daha fazla kalibrasyon değeri de girebilirsiniz. Kalibrasyon hakkında daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Adım 7

Sensör Oturumunuzun Sona Erdirilmesi

Sensör otomatik olarak her 7 günde bir kapanır. Alıcı, sensör oturumunun sona ermesini 6 saat, 2 saat ve 30 dakika kala sizi uyarır. Sensörü çıkartma zamanı geldiğinde ekranda Sensörü Şimdi Değiştirin uyarısı görülür.




Sensörü Şimdi Değiştirin ekranı

Sensörünüzün ve Vericinizin Çıkarılması:

NOT: Vücudunuzdan çıkartırken sensörü ve vericiyi tek parça halde tutun.

- Sensör bölmesini vücudunuzdan yara bandı gibi çekip çıkartın. Tüm sensör vücudunuzdan çıkmadan, vericiyi sensörden çıkartmayın.

- Sensör bölmesini/vericiyi düz bir yüzeye yatırın. Vericiyi çıkarmanın iki yolu vardır:

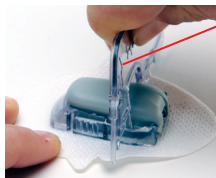

Güvenlik kilidi

- Sensör bölmesinin arka bölümünü çıkartmak için parmaklarınızı kullanın. Verici çıkacaktır.

YA DA

- Güvenlik kilidini kullanın (sensör aplikatörünün kilidi). Güvenlik kilidini tırtıklı uçlarını, sensör bölmesindeki vericinin geniş kenarlarına "oturacak" şekilde takın. Güvenlik Kilidini sonuna kadar bastırın ve yukarı çekin. Verici çıkacaktır.



Güvenlik Kilidi Takılı Haldeki Verici

- Vericiyi saklayın. Kana temas eden bileşenlerin bertaraf edilmesi konusundaki yerel talimatlara göre sensörü atın.

Sensör Sorunlarını Giderme

Eğer çözemediğiniz bir sorunuz olursa, Dexcom G4 PLATINUM Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna ya da yerel yetkili dağıtıcınıza başvurun. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi çevrimiçi eğitim programına bu adresten ulaşabilirsiniz www.dexcom.com.

Durum Ekranındaki Kan Damlası		Kalibrasyon Gerekli. <ul style="list-style-type: none">Hızlı başlatma kılavuzunun 6. adımında açıklandığı gibi bir kalibrasyon değeri girin.
15 Dakika Bekleme Kalibrasyon Hatası		Sensör doğru biçimde kalibre edilmedi. <ul style="list-style-type: none">SEÇ tuşuna basın. durum çubuğunda görülür15 dakika bekleyin, sonra 1 kalibrasyon girinEğer hata devam ederse, 1 kalibrasyon girip 15 dakika bekleyinEğer sensör glikoz değerleri görünmezse, yerel dağıtıcınızla temasa geçin.
1 Saat Bekleme Kalibrasyon Hatası		Sensör doğru biçimde kalibre edilmedi. <ul style="list-style-type: none">SEÇ tuşuna basın. durum çubuğunda görülür1 saat kadar bekleyin, sonra 1 kalibrasyon girin15 dakika bekleyin. Eğer sensör glikoz değerleri görünmezse, yerel dağıtıcınızla temasa geçin.
Durum Çubuğunda ??? Glikoz Değeri Hatası		Bekleyin. ??? birkaç dakika ya da saat içinde kendiliğinden kaybolur. Eğer 3 saat sonra devam ediyorsa, yerel dağıtıcınızla temasa geçin. <ul style="list-style-type: none">Kalibrasyon yapmayınSensör bölmesinin vücudunuza saplandığından ve vücudunuza sürütülen bir şey olmadığından emin olunVericinin her iki tarafının oturduğunu kontrol edin.
Sensör Hatası		Sensör 7 günlük oturumun bitmesinden önce kapanır. <ul style="list-style-type: none">Uyarıyı/Ekranı silmek için SEÇ tuşuna basınYerel dağıtıcınızla temasa geçinAnzalı sensörü çıkartarak yeni bir sensör takın

Alıcı Ekranı

Sensör oturumu boyunca alıcınızı açtığınızda bu ekranı görürsünüz.



NOT: Yüksek Alarm seviyesinin üzerindeki sensör glikoz değerleri sarı görülür. Düşük Alarm seviyesinin altındaki sensör glikoz değerleri kırmızı görülür. Hedef aralıktaki sensör glikoz değerleri beyazdır.

Kalibrasyon "Yapılması Gerekenler"

- Sensör oturumu boyunca, tüm kalibrasyonlar için aynı kan glikoz ölçüm cihazını kullanın.
- Kan şekeri test çubuklarınızın doğru kodlandığından ve son kullanım tarihlerinin geçmediğinden emin olun.
- Kan şekerinizi ölçmeden önce ellerinizi yıkayın ve kurulaştırın.
- Kalibrasyon için sadece **parmak ucu** numunesinin kan şekeri değerlerini kullanın.

Kalibrasyon "Yapılmaması Gerekenler"


- Durum çubuğunda ya da gördüğünüzde kalibrasyon yapmayın.
- Kan şekeri değerinizi 400 mg/dL'nin üzerinde ya da 40 mg/dL'nin altındayken kalibrasyon yapmayın.
- Vücudunuzda acetaminophen (parasetamol) içeren bir ilaç varsa kalibrasyon yapmayın.

Düşük Glikoz Alarmı

Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin otomatik düşük glikoz değeri 55 mg/dL'ye ayarlanmıştır. Bu ALARMİ ya da yeniden uyarı verme ayarlarını değiştiremezsiniz. Eğer bu alarmı alırsanız:

- Silmek için **SEÇ** tuşuna basın.

- Eğer sensör kan şekeri değerinizi hala 55 mg/dL seviyesinin altındaysa, 30 dakika sonra bu alarmı tekrar alırsınız.

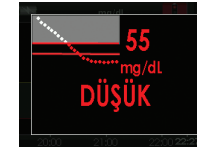


Düşük Glikoz Alarmı

Gelişmiş Özellikler Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemi

Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin gelişmiş özellikleri glikoz takibini bir sonraki aşamaya taşır. Değişim okları ve Olay İşaretleri haricinde, bu gelişmiş özellikler Dexcom G4 PLATINUM Sistemini ilk aldığınızda kapalıdır ancak açılabilir ve kişiselleştirilebilir.

Gelişmiş Seçenek No 1: Değişim Okları

Değişim okları, alıcı değişim ekranında bir sonraki sensör glikoz değerini gösterir. Değişim okları glikozdaki değişikliklere ait yön ve hız bilgilerini gösterir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

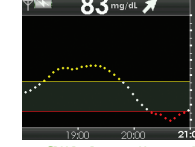

Değişim grafiğinin sağ üst köşesinde değişim oranı oku görülür

Ok Yönü	Ok Bilgisi	Ok Açıklaması
→	Sabit	0-1 mg/dL/dk
↗	Yavaşça yükseliyor	1-2 mg/dL/dk
↑	Yükseliyor	2-3 mg/dL/dk
↗↗	Çok hızlı yükseliyor	3 ya da daha yüksek mg/dL/dk
↘	Yavaşça düşüyor	1-2 mg/dL/dk
↓	Düşüyor	2-3 mg/dL/dk
↘↘	Çok hızlı düşüyor	3 ya da daha yüksek mg/dL/dk
↔	Değişim Oranı Yok Bilgisi	Ok yok

Gelişmiş Özellikler (devamı)

Gelişmiş Seçenek No 2: Olay İşaretleri


Olay işaretleri size ve sağlık ekibine glikoz model ve değişimlerini daha iyi anlamanızda yardımcı olur. Olaylar karbonhidratı (gram), insülini (birim), antrenmanı (yoğunluk ve süre) ve sağlık seviyesini (hastalık, yüksek/düşük semptomlar, menstrual döngü, alkol seviyesi) içerir. Olay işaretleri alıcıda görünmez ancak Dexcom Studio yazılımına indirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Gelişmiş Seçenek No 3: Gelişmiş Uyarılar

Herhangi bir gelişmiş uyarıyı açmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için **SEÇ** tuşuna basın.

- Profilleri işaretlemek için **AŞAĞI** ok tuşuna basın. **SEÇ** tuşuna basın.

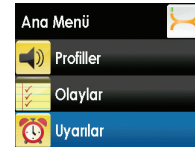

Ana Menü, Uyarılar işaretlenmiş

- Gelişmiş Seçenekleri işaretlemek için **AŞAĞI** ok tuşuna basın. **SEÇ** tuşuna basın.



Uyarılar menüsü, Gelişmiş işaretlenmiş

(1) Yüksek/Düşük Alarm Ertelemeleri

Yüksek/Düşük alarm ertelemeleri, sensör glikoz değerleriniz yüksek ya da düşük seviyede kaldığı zaman sizi yeniden uyarır. Alarm ertelemesi, sizi her 15 dakikadan 5 saate kadar uyarmak üzere ayarlanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.



Gelişmiş Özellikler menüsü, Yüksek Erteleme işaretlenmiş



Yüksek Alarm ayarı ekranı, 15 dakika seçilmiş


Gelişmiş Özellikler (devamı)

(2) Glikoz Oranı Alarmlarının Yükselişi/Düşüşü


Glikoz oranı alarmları sensör glikoz değerleriniz dakikada 2 mg/dL ya da daha fazla veya dakikada 3 mg/dL ya da daha fazla oranlarda yükselirken (yükselme alarmı) ya da düşerken (düşüş alarmı) görülebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.



Gelişmiş Özellikler Menüsü, Yükselme Hız, Düşüş Hız, Yükselme Hız

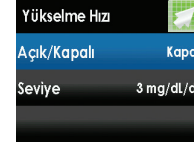


Yükselme Hız, Açık/Kapalı, Seviye, 3 mg/dL/dk

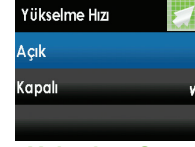

Yükselme Hız, Açık

(3) Kapsam Dışı Uyarısı

Alıcı ve vericinizin 20 ila 200 dakika kadar iletişim kuramaması durumunda Kapsam Dışı Uyarısı alınır. Kapsam Dışı Sembolü () değişim grafiğinin sağ üst köşesinde görülür ve Kapsam Dışı ekranı belirir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

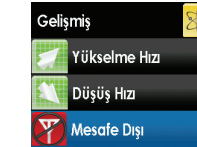

Gelişmiş Özellikler Menüsü, Kapsam Dışı işaretlenmiş




Kapsam Dışı uyarısı ekranı

Sıkça Sorulan Sorular (devamı)

Yüksek/Düşük glikoz alarm seviyelerini nasıl değiştirebilirim?

Aşağıdaki adımları takip edin:

- Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için **SEÇ** tuşuna basın.
- Uyarıları işaretlemek için **AŞAĞI** ok tuşuna basın. **SEÇ** tuşuna basın.

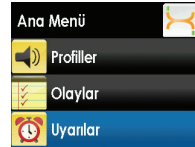


Ana Menü, Uyarılar işaretlenmiş

- Yüksek Alarmı seçmek için **SEÇ** tuşuna basın. Ya da, Düşük Alarmı seçmek için **AŞAĞI** ok tuşuna, ardından **SEÇ** tuşuna basın.



Uyarılar Menüsü, Yüksek Alarm işaretlenmiş

- Alarm seviyesini değiştirmek için **YUKARI** ya da **AŞAĞI** tuşlarına basın.
- Değişiklikleri onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.

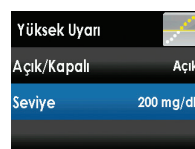

Yüksek Alarm ekranı, Seviye işaretlenmiş

Dexcom G4 PLATINUM Vericisinin garantisini ne kadar süreyi kapsar?

Vericinin garanti süresi 6 aydır.

Dexcom G4 PLATINUM Alıcısının garantisini ne kadar süreyi kapsar?

Alıcının garanti süresi 12 aydır.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
ABD Dışındaki Ülkeler: Yerel dağıtıcınızla temasa geçin

EC REP MedTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Wageningen
Tel. +31.43.306.3320
Faks. +31.43.306.3338



© 2014 Dexcom, Inc. Her hakkı saklıdır.

LBL012720 Rev 01 MT22829

Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM ve Dexcom Studio markaları birer tescilli markadır ya da ABD ve/veya diğer ülkelerdeki Dexcom, Inc. markalarıdır. Bu yayında adı geçebilecek diğer tüm ürün veya şirket adları kendi sahiplerinin ticari adları, ticari markaları veya tescilli markalarıdır.

Dexcom